



WIELKOPOLSKA
IZBA
LEKARSKA

Maseczka ochronna* instrukcja wykonania




*wzór wykonany na zlecenie
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej



Tutorial dotyczy wykonania maseczek ochronnych z dwuwarstwowej włókniny*.

**rekomendowana
włóknina:
Włóknina typu
SPUNBOND
100%
polipropylen
o gramaturze
70g/m²*

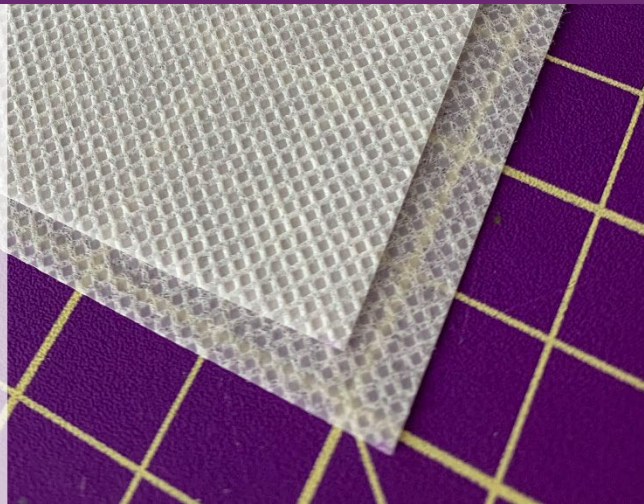




Potrzebne materiały i przybory

- włóknina o wymiarach 44 cm x 20 cm
- tasiemka do wiązań 2 x 1 m, bawełniana o szer. 1 cm do 2,5 cm, ewentualnie wykrojona z tej samej włókniny o szer. 2,5 cm.
- drucik miedziany o długości 10 cm, grubość 0,6-0,7 mm
- miara krawiecka, linijka
- nożyczki, obcinaczki
- klamerki, nie używamy szpilek
- nitka bawełniana
- sprawna maszyna do szycia



Dłuższą
krawędź
włókniny
składamy
na połowę i
spinamy
klamrami.


Krok 1

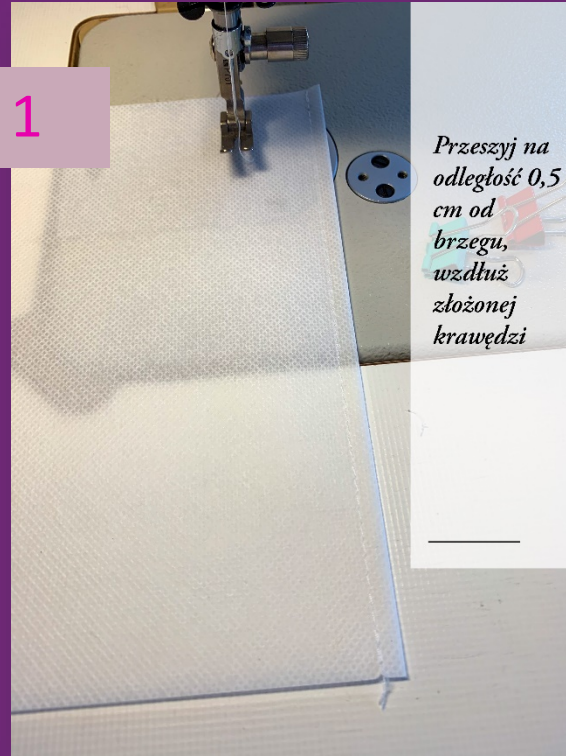

*Przeszyj na
odległość 0,5
cm od
brzegu,
wzdłuż
złożonej
krawędzi*



Krok 2

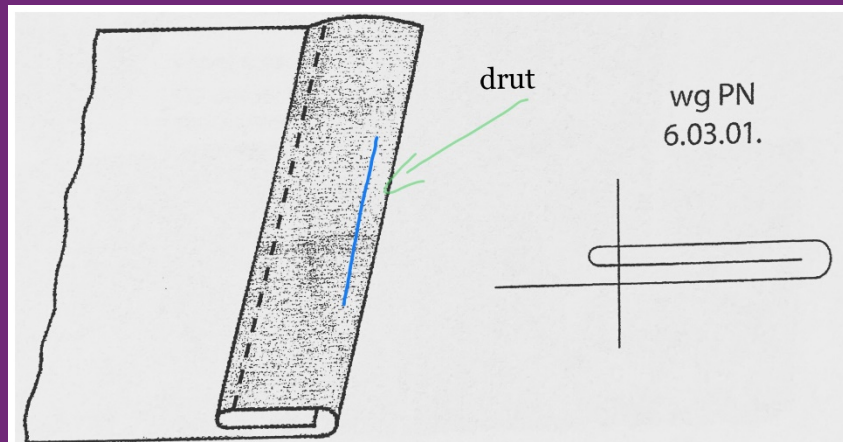


Teraz obszyjemy krawędź przeciwną:

- zawiń krawędź 2 x na szer. 1 cm
- w zwinietej krawędzi, na środku obrębu włóż drut (do środka)
- zepnij zwinieły brzeg klamrami
- przeszuj na milimetr
- pamiętaj żeby drut ułożyć po zewnętrznej stronie obrębu, ułatwi to szycie, nie przeszujemy go wtedy maszyną



Krok 3

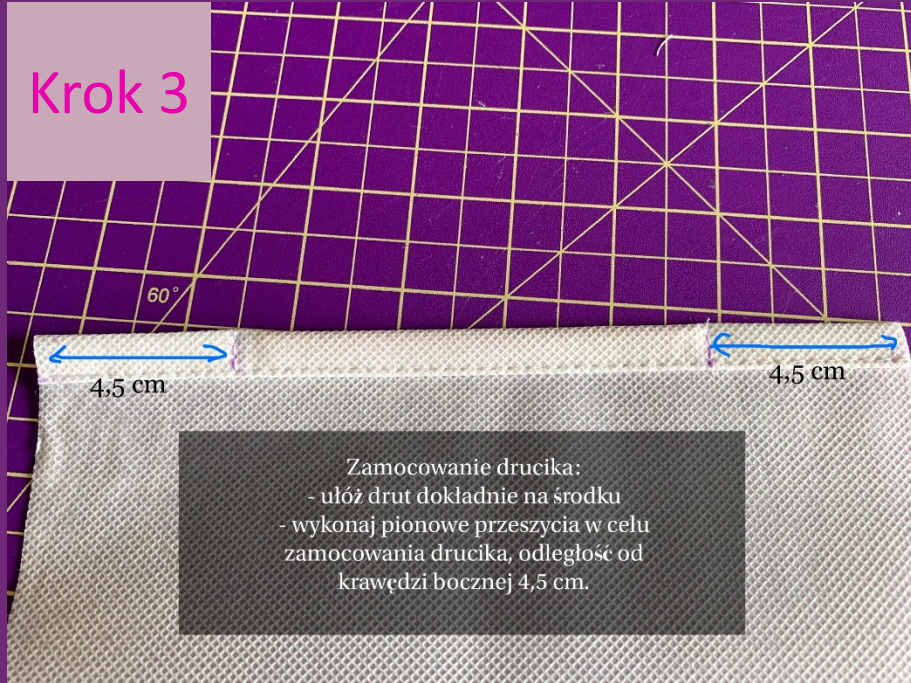


Plik video dostępny jest także
[pod linkiem](#)

Krok 4


Według zaznaczeń układamy trzy zakładki w stronę krawędzi z drutem.
Spinamy klamerkami.
Przyszywamy na odległość max. 0,5 cm od brzegu.

*Zaznaczamy miejsca
zakładek wg
podanego wzoru.
Odległości
odmierzamy od
krawędzi z wszytym
drucikiem.
Zaznaczenia
zakładek robimy po
obu stronach.*

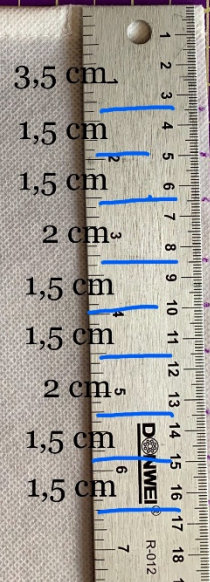



Plik video dostępny jest także
[pod linkiem](#)

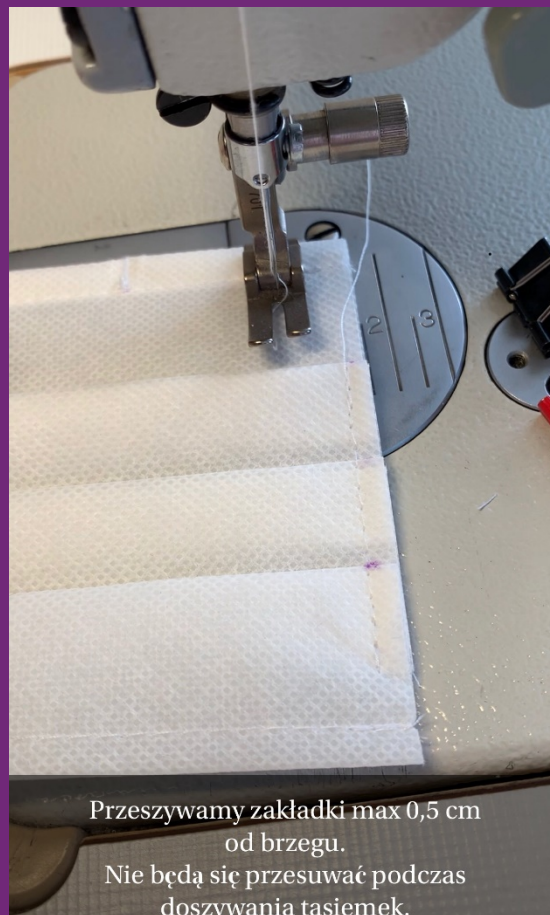

Przeszywamy zakładki max 0,5 cm
od brzegu.
Nie będą się przesuwać podczas
doszywania tasiemek.



Krok 5



Taśma jest do wyboru, szeroka lub wąska.
Ja na potrzeby tego tutorialu użyłam
bawełniane, szeroką o szer. 2,5 cm i wąską
o szer. 1 cm.

Do jednej maseczki potrzebujemy dwie
równe tasiemki o długości 1 m.



Taśma szeroka

*Tasiemkę szeroką
wszywany podobnie
jak lamówkę.
Składamy ją po
długości na połowę i
nakładamy na brzeg
maseczki, tak żeby
maska była w środku
naszej taśmy.*

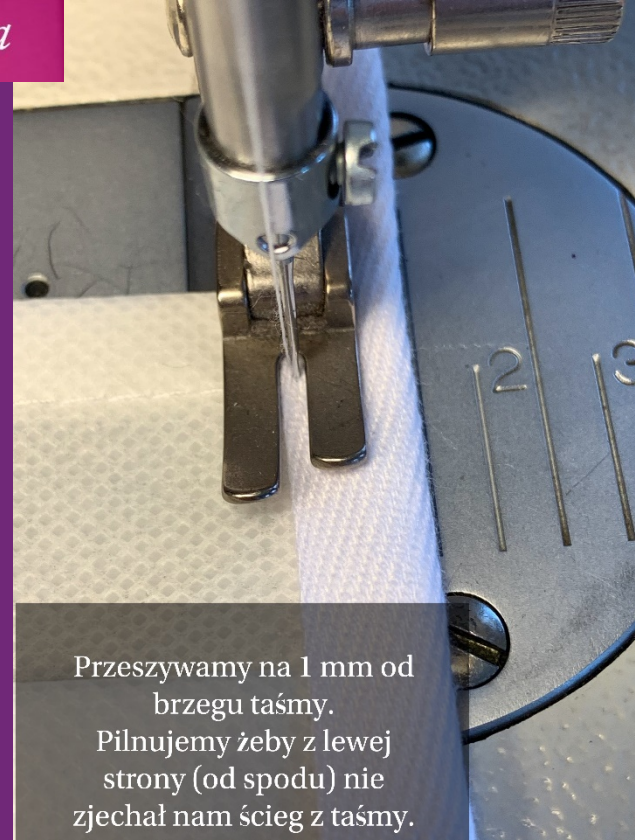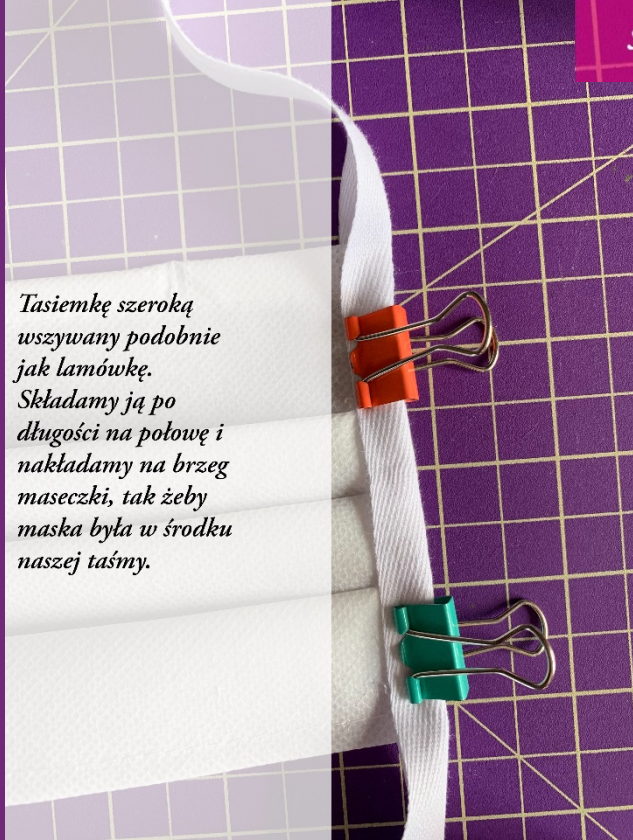

Przeszywamy na 1 mm od
brzegu taśmy.
Pilnujemy żeby z lewej
strony (od spodu) nie
zjechał nam ścieg z taśmy.



*Taśma
szeroka*

*Taśma szeroka po
wszyciu.*

*Jeżeli wasze tasiemki są
wycięte z włókniny,
to wszywacie je tak samo.*





Taśma wąska

Taśmę wąską układamy płasko,
równo przy krawędziach boków.
Spinamy klamerkami.



Przyszywając taśmę wąską,
przeszywamy na odległość
1 mm po obu krawędziach taśmy





*Taśma
wąska*

*Taśma
wąska
po
wszyciu.*





WIELKOPOLSKA
IZBA
LEKARSKA

Gotowe!

WAŻNE!

**Maseczek z włókny nie wolno prasować ani prać.
Do zaznaczania używaj przyborów które łatwo usunąć, albo „znikających” pisaków.
W przypadku jakichkolwiek niejasności co do wykonania maseczki proszę o kontakt
przez facebook - Krawcownia Poznań**

New Make
Cutting Mat
11122 31 x 34 (30cm x 60cm)
This mat is made of high quality material and is
suitable for cutting fabric, paper, cardboard, etc.
It is easy to clean and use.